


Pflege weicher Kontaktlinsen mit einem Katalysator-System

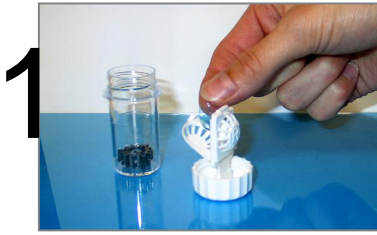

1

Waschen Sie gründlich Ihre Hände und trocknen Sie sie ab.

Danach nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen aus den Augen, und legen die Kontaktlinsen in die dafür vorgesehenen Körbchen und schließen diese.



2

Füllen Sie den Behälter bis zur Markierung mit der Wasserstoffperoxidlösung und schrauben Sie den Deckel darauf.

Schütteln sie den Behälter kurz, um auch den Deckel von innen zu desinfizieren.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Wasserstoffperoxidlösung mit den Augen!!!



3

In aufrechter Position lassen Sie den Behälter **mindestens 6 Stunden** stehen, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen.

Der Katalysator wandelt jetzt die reinigende und desinfizierende Wasserstoffperoxidlösung in eine neutrale Wasserlösung um. Diese Lösung enthält keine chemischen Bestandteile mehr, die Irritationen am Auge auslösen könnten.



4

Vor dem Öffnen des Behälters **schütteln** Sie ihn erneut kurz, um das Kondensat auf der Deckelinnenseite zu neutralisieren.

Nach der Neutralisation können Sie **die Kontaktlinsen entnehmen und sofort einsetzen**. Empfehlenswert ist das **vorherige Abspülen** mit einer konservierungsmittelfreien Kochsalzlösung.

Gießen Sie die Lösung aus dem Behälter. Sie ist nicht mehrmals verwendbar!



5

Wenn Ihr Kontaktlinsenanpasser Ihnen dazu rät, führen Sie 1x pro Woche eine **Proteinentfernung** durch.

Geben Sie hierzu eine Proteinentfernungstablette zusätzlich zur täglichen Reinigung in den Behälter und lassen ihn **6 bis max.12 Stunden** stehen.

Spülen Sie die Kontaktlinse vor dem Einsetzen unbedingt mit einer Kochsalzlösung ab.




Hauptstraße 57
79761 WaldshutTiengen

Fon 07741 913733

info@dieOptiker.de

www.dieOptiker.de

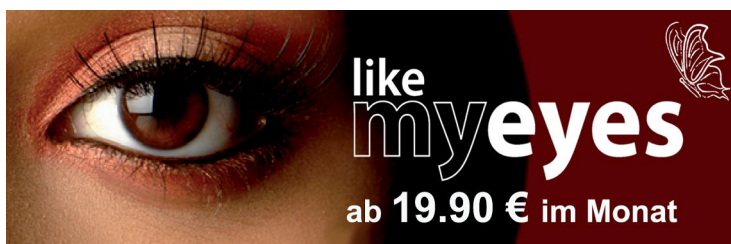

like
myeyes

ab 19.90 € im Monat

Kontaktlinsen & Pflege im ABO

sicher - inkl. regelmäßige Kontrollen
bequem - Lieferservice nach Hause
preiswert - monatliche kleine Beiträge



alle Info's auf www.dieOptiker.de